



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : REFRIGERANTE DIMROTH CON CONECTOR DE PTFE
Descripción : De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector de PTFE tiene rosca GL 14 y es para tubo de Øint. 8 mm


DATOS TÉCNICOS

referencia	lútil (mm)	ltotal (mm)	boca	descripción	unidades por ref.
DROT-200-001	200	295	14/23	Dimroth	1
DROT-300-001	300	460	29/32	Dimroth	1
DROT-400-001	400	560	29/32	Dimroth	1
DROT-A01-001	-	-	-	conector de PTFE	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DROT-200-001	1,36	0,25	70172000	08434868018204
DROT-300-001	1,70625	0,42	70172000	08434868018211
DROT-400-001	2,08125	0,52	70172000	08434868018228
DROT-A01-001	0,28	0,02	39269097	08434868018235

FOTO DEL PRODUCTO

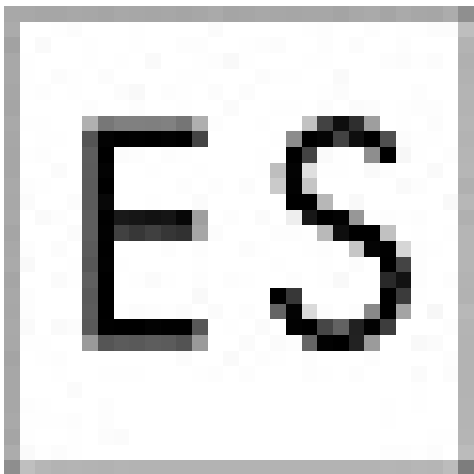

MATERIAL : LBG 3.3

El vidrio borosilicato 3.3 es un vidrio con contenido mínimo en sílice.

Es prácticamente libre de magnesio, cal y zinc y contiene sólo trazas de metales pesados.

Composición química:

- 81% en peso de SiO₂
- 13,0% en peso de B₂O₃
- 4% en peso de Na₂O

Propiedades térmicas:

- Coeficiente de expansión lineal: $32,5 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura máxima de trabajo : 515 ° C
- Temperatura de recocción: 565 ° C
- Temperatura de reblandecimiento: 820 ° C
- Calor específico: 0,2
- Conductividad térmica (cal/cm³ / ° C / sec): 0,0027

Resistencia Química:

Este vidrio es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos. Incluso durante el largos períodos de exposición y a temperaturas superiores a 100 ° C, su resistencia química supera la de la mayoría de los metales y otros materiales.

Puede soportar repetidas esterilizaciones en seco y en húmedo sin deterioro de la superficie y su consiguiente contaminación. Resiste al ataque de diversas sustancias químicas. Sólo el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico muy caliente y soluciones alcalinas con el aumento de la concentración y la temperatura, atacan cada vez más la superficie de vidrio.



GENERAL INFORMATION

Product name : DIMROTH CONDENSER WITH PTFE SCREWTHREAD CONNECTORS**Description :** Made of borosilicate glass LBG 3.3. Hose connector is GL 14 PTFE threaded and is designed for tubing Øinner 8 mm


TECHNICAL DATA

reference	luseable (mm)	ltotal (mm)	mouth	description	pcs/pack
DROT-200-001	200	295	14/23	Dimroth	1
DROT-300-001	300	460	29/32	Dimroth	1
DROT-400-001	400	560	29/32	Dimroth	1
DROT-A01-001	-	-	-	PTFE screwthread connector	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DROT-200-001	1,36	0,25	70172000	08434868018204
DROT-300-001	1,70625	0,42	70172000	08434868018211
DROT-400-001	2,08125	0,52	70172000	08434868018228
DROT-A01-001	0,28	0,02	39269097	08434868018235

PRODUCT PHOTO

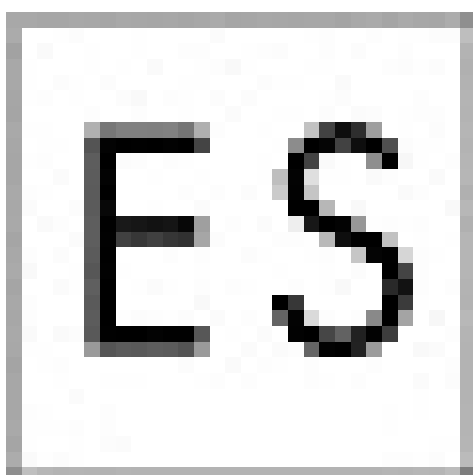

MATERIAL : LBG 3.3

LBG 3.3 is a borosilicate glass with a minimum content in silica of 80% and a low expansion coefficient ($3.3 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹) included in the 3.3 borosilicate group, as defined in ISO 3585 standard.

It is used in products where chemical and mechanical resistance is to be combined with resistance to sudden temperature changes. This particular combination of properties makes this type of glass the most used in labware.

Physical and chemical properties:

- Linear expansion coefficient (@ 20/300 °C): $3.3 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹
- Strain point: 520 °C
- Annealing point: 560 ± 10 °C
- Softening point: 820 ± 10 °C
- Density: 2.23 ± 0.02 g/cm³
- Hydrolytic resistance (according to ISO 719, water at 98 °C): Class 1
- Hydrolytic resistance (according to ISO 720, water at 121 °C): Class 1
- Resistance to acids (according to ISO 1776, DIN 12116): Class 1
- Resistance to alkalis (according to ISO 695): Class 2

Typical composition:

- 80.4% in weight SiO₂
- 13.0% in weight B₂O₃
- 4.2% in weight Na₂O
- 2.4% in weight Al₂O₃

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RÉFRIGÉRANT DIMROTH AVEC CONNECTEUR EN PTFE**Description :** En verre borosilicaté LBG 3.3. Le connecteur GL 14 en PTFE est conçu pour tube de Øint. 8 mm


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. utile (mm)	long. totale (mm)	col	description	unités par ref.
DROT-200-001	200	295	14/23	Dimroth	1
DROT-300-001	300	460	29/32	Dimroth	1
DROT-400-001	400	560	29/32	Dimroth	1
DROT-A01-001	-	-	-	connecteur en PTFE	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DROT-200-001	1,36	0,25	70172000	08434868018204
DROT-300-001	1,70625	0,42	70172000	08434868018211
DROT-400-001	2,08125	0,52	70172000	08434868018228
DROT-A01-001	0,28	0,02	39269097	08434868018235

PHOTO PRODUIT

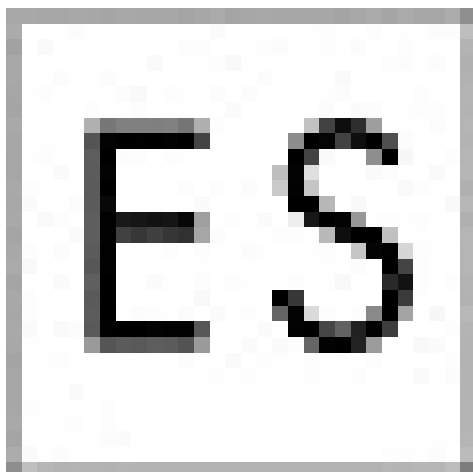

MATÉRIEL LBG 3.3

LBG 3.3 est un verre borosilicaté ayant un contenu minimal en silice de 80% et un très faible coefficient d'expansion ($3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) qui appartient au groupe des borosilicates type "3.3" tel que défini par la norme ISO 3585. Il s'emploie avec des produits où se combinent résistance chimique, résistance mécanique et résistance aux changements brusques de température. En raison de cette combinaison unique, ce type de verre est majoritairement utilisé pour les produits de laboratoire.

Propriétés physiques et chimiques:

• Coefficient de dilatation linéaire (@ 20/300°C)	$3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
• Température de réfectivité (Strain Point)	520 °C
• Température de maturation (Annealing point)	$560 \pm 10 \text{ °C}$
• Température de ramollissement (Softening point)	$820 \pm 10 \text{ °C}$
• Densité $2,23 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$	
• Résistance hydraulique (Selon ISO 719, eau à 98°C)	Classe 1
• Résistance hydraulique (Selon ISO 720, eau à 121°C)	Classe 1
• Résistance aux acides (Selon ISO 1776)	Classe 1
• Résistance aux alcalis (Selon ISO 695)	Classe 2

Composition typique:

- 80,4% en poids SiO_2
- 13,0% en poids B_2O_3
- 4,2% en poids Na_2O
- 2,4% en poids Al_2O_3

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : REFRIGERANTE DIMROTH CON RACCORDO IN PTFE**Descrizione :** In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo in PTFE ha una filettatura GL 14 ed è adatto a un tubo di Øint 8 mm


DATI TECNICI

referenza	lutile (mm)	ltotale (mm)	bocchetta	descrizione	unità per ref.
DROT-200-001	200	295	14/23	Dimroth	1
DROT-300-001	300	460	29/32	Dimroth	1
DROT-400-001	400	560	29/32	Dimroth	1
DROT-A01-001	-	-	-	raccordo in PTFE	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DROT-200-001	1,36	0,25	70172000	08434868018204
DROT-300-001	1,70625	0,42	70172000	08434868018211
DROT-400-001	2,08125	0,52	70172000	08434868018228
DROT-A01-001	0,28	0,02	39269097	08434868018235

FOTO DEL PRODOTTO

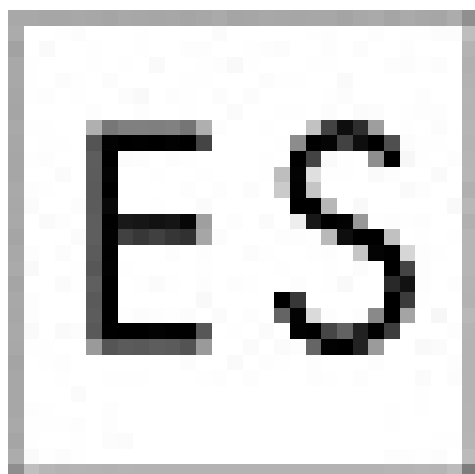

MATERIALE LBG 3.3

LBG 3.3 è un vetro borosilicato con un contenuto minimo di silice del 80% e un basso coefficiente di espansione ($3,3 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹) che appartiene al gruppo dei borosilicati tipo "3.3", come viene descritto nella norma ISO 3585. Si utilizza per prodotti dove si deve combinare resistenza chimica, resistenza meccanica e resistenza ai cambi bruschi di temperatura, e proprio per questa combinazione unica è il tipo di vetro di riferimento con il quale si fabbricano la maggior parte dei prodotti da laboratorio.

Proprietà fisiche e chimiche

• Coefficiente di espansione lineare (@ 20/300 °C):	3,3•10-6 K-1
• Temperatura di decotto (Strain point):	520 °C
• Temperatura di maturazione (Annealing point):	560 ± 10 °C
• Temperatura di rammollimento (Softening point):	820 ± 10 °C
• Densità:	2,23 ± 0,02 g/cm3
• Resistenza idrolitica (secondo ISO 719, acqua a 98 °C):	Classe 1
• Resistenza idrolitica (secondo ISO 720, acqua a 121 °C):	Classe 1
• Resistenza agli acidi (secondo ISO 1776):	Classe 1
• Resistenza agli alcali (secondo ISO 695):	Classe 2

Composizione tipica:


- 80,4% in peso SiO₂
- 13,0% in peso B₂ O₃
- 4,2% in peso Na₂O
- 2,4% in peso Al₂ O₃

Revisiedatum: 31/10/2025
Ref. Doc.: PDS-147**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : DIMROTH KOELER MET PTFE-AANSLUITING****Beschrijving :** Van borosilicaatglas LBG 3.3. De PTFE aansluiting bevat een GL 14-schroef en is voor een buis met Øint. 8 mm**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	lnuttig (mm)	ltotaal (mm)	mond	beschrijving	stuks per ref.
DROT-200-001	200	295	14/23	Dimroth	1
DROT-300-001	300	460	29/32	Dimroth	1
DROT-400-001	400	560	29/32	Dimroth	1
DROT-A01-001	-	-	-	connector van PTFE	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DROT-200-001	1,36	0,25	70172000	08434868018204
DROT-300-001	1,70625	0,42	70172000	08434868018211
DROT-400-001	2,08125	0,52	70172000	08434868018228
DROT-A01-001	0,28	0,02	39269097	08434868018235

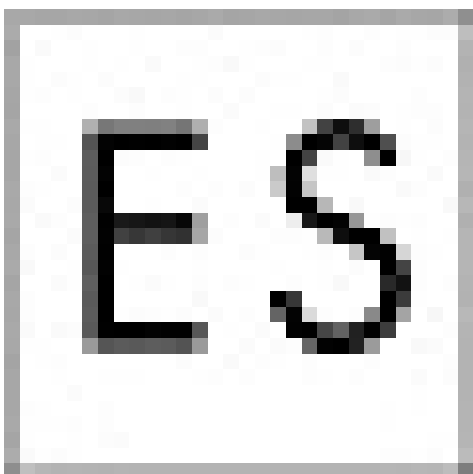PRODUKTFOTO

MATERIAAL

MATERIAAL: LBG 3.3 Borosilicaatglas 3.3 is een glas met een minimaal silicagehalte. Het bevat vrijwel geen magnesium, kalk en zink en bevat alleen sporen van zware metalen. Chemische samenstelling: 81% van het gewicht van SiO_2 13,0% van het gewicht van B_2O_3 4% van het gewicht van Na_2O Thermische eigenschappen: Lineaire uitbreidingscoëfficiënt: $32,5 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ Maximale werkteemperatuur: $515 \text{ }^\circ\text{C}$ Onthardingstemperatuur: $565 \text{ }^\circ\text{C}$ Verwekingstemperatuur: $820 \text{ }^\circ\text{C}$ Specifieke hitte: 0,2 Thermische geleidbaarheid ($\text{cal/cm}^3 / \text{ }^\circ\text{C} / \text{sec}$): 0,0027 Chemische weerstand: Dit glas is zeer goed bestand tegen water, neutrale en zure oplossingen, geconcentreerde zuren en mengsels daarvan, alsmede tegen chloride, broom, jodium en organische oplosmiddelen. Zelfs bij langdurige blootstelling en bij temperaturen boven $100 \text{ }^\circ\text{C}$ overtreft de chemische weerstand die van de meeste metalen en andere materialen. Het is bestand tegen herhaalde natte en droge sterilisaties zonder aantasting van het oppervlak en verontreiniging. Het is bestand tegen de aantasting door verschillende chemische stoffen. Alleen fluorwaterstofzuur, zeer heet fosforzuur en alkalische oplossingen tasten bij toenemende concentratie en temperatuur het glasoppervlak in toenemende mate aan.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : DIMROTH-KÜHLER MIT PTFE-VERBINDUNGSSTÜCK

Beschreibung : Aus Borosilikatglas LBG 3.3. Das Verbindungsstück aus PTFE verfügt über ein GL14-Gewinde und eignet sich für Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser.


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LNutz. (mm)	Lgesamt (mm)	Normschliff	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
DROT-200-001	200	295	14/23	Dimroth	1
DROT-300-001	300	460	29/32	Dimroth	1
DROT-400-001	400	560	29/32	Dimroth	1
DROT-A01-001	-	-	-	PTFE- Verbindungsstück	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DROT-200-001	1,36	0,25	70172000	08434868018204
DROT-300-001	1,70625	0,42	70172000	08434868018211
DROT-400-001	2,08125	0,52	70172000	08434868018228
DROT-A01-001	0,28	0,02	39269097	08434868018235

PRODUKTFOTO

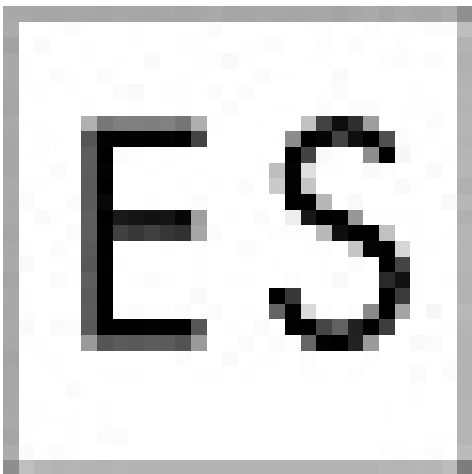

MATERIAL

MATERIAL: LGB 3.3 Borosilikatglas 3.3 ist ein Glas mit einem Mindestgehalt an Kieselsäure. Es ist praktisch frei von Magnesium, Kalk und Zink und enthält nur Spuren von Schwermetallen. Chemische Zusammensetzung: 81 % Gewichtsanteil SiO₂ 13,0 % Gewichtsanteil B₂O₃ 4 % Gewichtsanteil Na₂O Thermische Eigenschaften: Koeffizient für lineare Ausdehnung $32,5 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$ Maximale Arbeitstemperatur: 515 °C Glühtemperatur: 565 °C Erweichungstemperatur: 820 °C Spezifische Wärme: 0,2 Wärmeleitfähigkeit (cal/cm³ / °C / sec): 0,0027 Chemische Beständigkeit: Dieses Glas ist sehr beständig gegen Wasser, neutrale und saure Lösungen, konzentrierte Säuren und ihre Mischungen sowie Chloride, Brom, Jod und organische Lösungsmittel. Auch bei langen Expositionszeiträumen und Temperaturen über 100 °C übertrifft seine chemische Beständigkeit die der meisten Metalle und anderen Materialien. Es kann wiederholte Sterilisierungen (trocken und nass) ohne Oberflächenverschleiß und die damit einhergehende Kontamination aushalten. Beständig gegen Angriffe durch verschiedene chemische Substanzen. Ausschließlich Flusssäure, sehr heiße Phosphorsäure und alkalische Lösungen mit hoher Konzentration und Temperatur verschleifen die Glasoberfläche jedes Mal etwas mehr.